

eylys
Eye Care Kit

Para el confort y la relajación diaria de los ojos


Una iniciativa de un especialista en córnea (FLVPEI)



DISPONIBLE A TRAVÉS DE JK MEDICAL EN AMÉRICA LATINA

Contenido de la Caja

Instrucciones de Uso

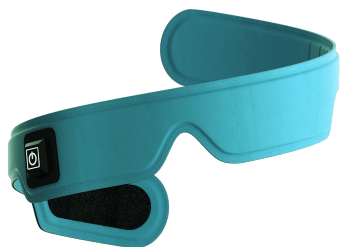

- 1 Dispositivo ocular térmico
- 2 Rodillo de masaje ocular
- 3 Cable USB tipo C a tipo C
- 4 Guía de bienvenida

INSTRUCCIONES DE USO



Paso 1: Encender

Use el cable USB tipo C a tipo C para conectar el dispositivo ocular térmico Eylys a una fuente USB tipo C de 5 voltios, como un teléfono móvil, una batería externa o una computadora portátil.

Presione el interruptor para encenderlo. Se inicia en el modo Azul (menos cálido). Si lo desea, presione el mismo botón para cambiar al modo Verde (cálido) o Rojo (más cálido), según su preferencia.

Paso 2: Colocar

Ajuste suavemente el lado anatómico del dispositivo sobre los ojos cerrados. No lo apriete demasiado. Apoye la cabeza para obtener mejores resultados. Una vez encendido, el dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos.

Paso 3: Masajear

Use el rodillo de masaje ocular sobre los ojos cerrados. Deslícelo suavemente de arriba hacia abajo sobre el párpado superior y de abajo hacia arriba sobre el párpado inferior. Repita 5 veces.

Características

Ajuste perfecto. Comodidad portátil.

CARACTERÍSTICAS

1 Ajuste perfecto. Cuidado perfecto.

La forma 3D patentada de Eylys se adapta cómodamente a los ojos para activar las glándulas de Meibomio de los párpados superiores e inferiores.

2 Disfrútelo en cualquier momento y lugar.

Conéctelo y úselo dondequiera que esté con cualquier dispositivo USB tipo C, como su teléfono, mediante un cable estándar tipo C a tipo C.

3 3 modos de temperatura

Con 3 modos seguros y eficaces, cada persona puede elegir el que le resulte más reconfortante.

4 Rápido y fácil

La terapia de 5 minutos de Eylys, con apagado automático, ayuda a refrescar los ojos en un abrir y cerrar de ojos.

5 Seguridad en múltiples niveles

Eylys incorpora sistemas de seguridad multinivel y control térmico.

6 Suave. Liso. Reconfortante.

Fabricado con tela hipoalergénica y recubrimiento antimicrobiano, Eylys es muy agradable para la piel.

BENEFICIOS

- ☐ Alivio de la fatiga ocular
- ☐ Alivia los ojos secos
- ☐ Relajación profunda
- ☐ Hidratación natural
- ☐ Protección digital

POSICIONAMIENTO

- ☐ Médico
- ☐ Óptico
- ☐ Farmacias
- ☐ Regalos corporativos
- ☐ Hoteles y spas

Comparación del Dispositivo: Eylys vs. Otros

Kit para el Cuidado de los Ojos Eylys

	EYLYS	OTROS
Diseño y propuesta única	Diseñado por un especialista en córnea (FLVPEI). La tecnología 3D de adaptación ocular* se ajusta a cada contorno para ofrecer comodidad y alivio de primera clase.	Las máscaras voluminosas de gránulos o gel (si no son eléctricas), o las máscaras planas (si son eléctricas), no tocan completamente la piel del párpado, lo que produce un alivio incompleto.
Características	Rodillo de masaje ocular. Alimentación mediante teléfono USB-C. 3 modos de temperatura: todos seguros y eficaces. Apagado automático en solo 5 minutos.	Si no es eléctrica: ninguna. Si es eléctrica: modos de temperatura muy alta (insegura) o baja (ineficaz), con apagado automático de hasta 60 minutos.
Requisitos adicionales	Utiliza un cable móvil USB-C estándar que puede conectarse a un teléfono USB-C para alimentar el dispositivo.	Necesita microondas, cocina a gas o hervidor eléctrico (máscara no eléctrica), o un cable propietario (máscara eléctrica).
Control térmico y seguridad	Rendimiento constante pese a cambios en la temperatura ambiente. Distribución uniforme del calor en los párpados superiores e inferiores, sin puntos calientes ni fríos.	Si no es eléctrica: temperatura inicial muy alta (con posible lesión térmica), seguida de una caída rápida a niveles ineficaces. Si es eléctrica: aumento lento y distribución no uniforme, con puntos calientes y fríos.
Seguridad de respaldo ante uso indebido	Detección automática de daños en el circuito interno y apagado permanente.	Ninguna.

*Patente en trámite. Toda la propiedad intelectual pertenece a Oculab Pvt. Ltd., India, o se utiliza bajo licencia.



KIT PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS

Calor constante. Rutina sencilla.



DISPONIBLE A TRAVÉS DE JK MEDICAL EN AMÉRICA LATINA

La disponibilidad y las declaraciones autorizadas varían según el país.

JK Medical, Inc.

Contacto del distribuidor para América Latina

Oficina: +1 (352) 324-3091

Móvil: +1 (407) 342-8575

Email: info@jkmedicalinc.com

Web: www.jkmedicalinc.com

Fabricante

Oculab Private Limited

Mumbai, India

www.oculab.in

Para el cuidado personal de los ojos y el bienestar. Este folleto es una descripción comercial y no sustituye el manual del usuario ni el consejo médico profesional. La disponibilidad, situación regulatoria, etiquetado, indicaciones, advertencias, empaque y accesorios incluidos varían según el país. Confirme la versión autorizada localmente antes de vender o usar el producto.