

EXPlasma

ESTERILIZADOR DE PLASMA COMPACTO

ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA

Diseñado para el entorno clínico.

Compacto. Rápido. Diseñado para el procesamiento de instrumental compatible sensible al calor y la humedad.



7 LITROS

CICLOS DE 10 Y 20 MIN

EXPlasma Z7

Una alternativa de baja temperatura para instrumentos que requieren mayor cuidado.

Cuando el vapor no es la opción adecuada, la esterilización a baja temperatura permite procesar instrumental compatible sensible al calor y la humedad.



55 °C o menos

Menor exposición a altas temperaturas.

10 o 20 minutos

Dos ciclos para adaptarse al flujo de trabajo diario.

7 litros

Una cámara compacta para cargas pequeñas y específicas.

Lo esencial, claramente.



INSTALACIÓN REAL

7 L

Cámara

10 min

Ciclo Flash

20 min

Ciclo Estándar

≤55 °C

Temperatura

3 TECNOLOGÍAS CENTRALES PATENTADAS

SAE-I / SAE-II

Aceleración de la esterilización mediante circulación forzada.

P-ART™

Tecnología de respiración artificial en bolsa.


AMR™

Eliminación automática de humedad antes del proceso.

Bomba seca, sin aceite | Dos bandejas incluidas | 60 dB o menos

Del inicio al fin, cada etapa bajo control.

El equipo gestiona automáticamente las diferentes etapas del ciclo de esterilización.

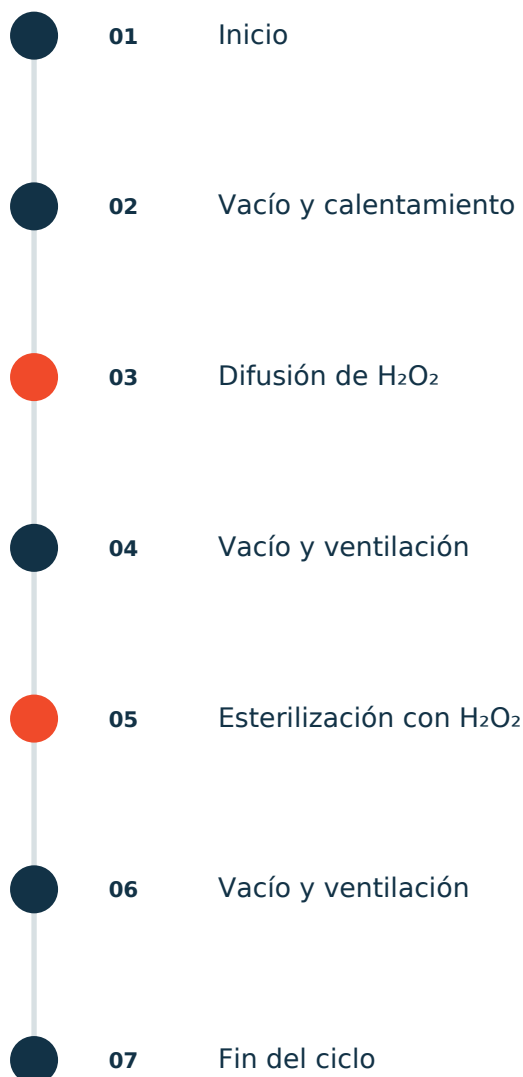

UNA CARGA CORRECTAMENTE PREPARADA ES ESENCIAL

El instrumental debe estar limpio, completamente seco, empacado en material compatible y colocado sin sobrecargar la cámara.

Tecnología que se integra al flujo de trabajo clínico.



Oftalmología

Procesamiento de instrumental delicado y cargas pequeñas.

Odontología

Procesamiento rápido de instrumental compatible sensible al calor y la humedad.

Cirugía y especialidades

Una solución compacta para el procesamiento de instrumental compatible en el punto de uso.

COMPATIBILIDAD

Diseñado para materiales que requieren cuidado.

Confirme siempre la compatibilidad y siga las instrucciones del fabricante de cada dispositivo antes de su procesamiento.

Metales compatibles

Aluminio serie 6000 | Acero inoxidable serie 300

Polímeros y otros materiales

Látex, nailon, silicona, ABS, Delrin, PVC, vidrio borosilicato tipo I, polietileno, neopreno, Kraton, resina fenólica, policarbonato, polieterimida, PET, PMMA, polifenilsulfona, polipropileno, poliestireno, polisulfona, PTFE, poliuretano y EVA.

Dispositivos con lumen

Teflón y silicona

Ø interior >1 mm

Longitud <500 mm

Acero inoxidable


Ø interior >1 mm

Longitud <300 mm

PREPARACIÓN DE LA CARGA

Una preparación correcta es fundamental para un procesamiento adecuado.

Ejemplos ilustrativos. Siga siempre el procedimiento validado de su institución y las instrucciones de uso correspondientes.

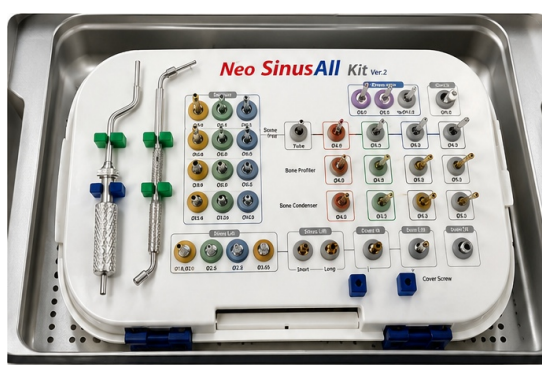

Carga organizada



Instrumental empacado

LIMPIO • SECO • COMPATIBLE • SIN SOBRECARGAR

ESPECIFICACIONES

Información esencial.

CÁMARA	7 litros
CICLOS	Flash 10 min Estándar 20 min
TEMPERATURA	55 °C o menos
DIMENSIONES	39 × 44 × 28 cm
PESO	30 kg
POTENCIA MÁXIMA	1,200 W
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	AC 220 V / 60 Hz*
ESTERILIZANTE	Solución de H ₂ O ₂ al 50%
NIVEL SONORO	60 dB o menos

*Consulte la configuración eléctrica disponible para su país.